

中华人民共和国卫生行业标准

WS 506—2016

口腔器械消毒灭菌技术操作规范

Regulation for disinfection and sterilization technique of dental instruments

2016-12-27 发布

2017-06-01 实施



中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 管理要求 2

5 口腔器械处理基本原则 3

6 口腔器械处理操作流程 3

7 监测要求 5

8 消毒与灭菌物品放行 5

9 器械储存 5

附录 A(规范性附录) 培训内容与管理要求 6

附录 B(规范性附录) 口腔器械危险程度分类与消毒、灭菌、储存要求 7

附录 C(规范性附录) 器械、器具和物品的清洗操作方法 8

附录 D(规范性附录) 牙科手机清洗、保养方法 10

附录 E(规范性附录) 小型灭菌器灭菌与监测要求 13

附录 F(资料性附录) 灭菌器灭菌周期运行记录表 15

前 言

本标准的 4.2.2d)、4.3.3、4.4.3、6.1.2a)和 c)、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3、6.6.2、6.6.3、6.7.2、7.1.3 为推荐性条款,其余为强制性条款。

根据《中华人民共和国传染病防治法》和《医院感染管理办法》制定本标准。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准起草单位:北京大学口腔医院、首都医科大学附属北京口腔医院、天津南开大学附属口腔医院、吉林大学口腔医院、中山大学附属口腔医院、中国疾病预防控制中心、北京大学第一医院。

本标准主要起草人:沈曙铭、刘翠梅、俞光岩、苏静、丁效芳、刘东玲、章小缓、班海群、李六亿、王春丽、李秀娥。

口腔器械消毒灭菌技术操作规范

1 范围

本标准规定了口腔器械消毒灭菌的管理要求、基本原则、操作流程、灭菌监测、灭菌物品放行和器械储存要求。

本标准适用于各级各类开展口腔疾病预防、诊断、治疗服务的医疗机构。已实现消毒供应中心集中供应的,其口腔器械的处置方法可参照本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 15982 医院消毒卫生标准

GB/T 19633 最终灭菌医疗器械的包装

WS 310.2 医院消毒供应中心 第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范

WS 310.3 医院消毒供应中心 第3部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准

WS/T 367 医疗机构消毒技术规范

YY 0646 小型蒸汽灭菌器 自动控制型

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

口腔器械 dental devices

用于预防、诊断、治疗口腔疾患和口腔保健的可重复使用器械、器具和物品。

3.2

牙科小器械 small dental devices

规格较小的牙科器械,如各种型号车针、根管器具等。

3.3

牙科手机 handpiece; dental

用来向牙科工具或器具传递(带转换或不带转换)工作所需能量的手持工具夹。

3.4

根管器具 root-canal instruments

用来对根管进行探查、穿透、预备或充填的器具,如根管锉、根管扩大器、根管光滑髓针等。

3.5

牙洁治器 dental scaler

专门设计和(或)用于清除牙齿表面牙垢的手动或电动牙科器械。

3.6

高度危险口腔器械 critical dental instruments

穿透软组织、接触骨、进入或接触血液或其他无菌组织的口腔器械。

3.7

中度危险口腔器械 **semicritical dental instruments**

与完整黏膜相接触,而不进入人体无菌组织、器官和血流,也不接触破损皮肤、破损黏膜的口腔器械。

3.8

低度危险口腔器械 **noncritical dental instruments**

不接触患者口腔或间接接触患者口腔,参与口腔诊疗服务,虽有微生物污染,但在一般情况下无害,只有受到一定量的病原微生物污染时才造成危害的口腔器械。

3.9

小型压力蒸汽灭菌器自动控制型 **small steam sterilizer-automatic type**

由电加热产生蒸汽或外接蒸汽的自动控制,其灭菌室容积不超过 60 L 的小型自动控制蒸汽灭菌器,以下简称小型灭菌器。

3.10

A 类空腔负载 **hollow load A**

单端开孔负载,其长度(L)与孔直径(D)的比率大于等于 1,小于或等于 750($1 \leq L/D \leq 750$)并且长度不大于 1 500 mm($L \leq 1\,500$ mm),或者两端开孔负载其长度与孔直径的比率大于等于 2,小于或等于 1 500 之间($2 \leq L/D \leq 1\,500$)并且长度不大于 3 000 mm($L \leq 3\,000$ mm),而且不属于 B 类空腔负载。

示例:牙科手机属于 A 类空腔负载器械。

[YY 0646—2015,定义 3.4]

3.11

B 类空腔负载 **hollow load B**

单端开孔负载,其长度(L)与孔直径(D)的比率大于等于 1,小于或等于 5($1 \leq L/D \leq 5$)而且孔径不小于 5 mm($D \geq 5$ mm);或者两端开孔负载其长度与孔直径的比率大于等于 2,小于或等于 10($2 \leq L/D \leq 10$)而且孔径不小于 5 mm($D \geq 5$ mm)。

[YY 0646—2015,定义 3.5]

3.12

工艺变量 **processing variable**

灭菌工艺的条件,其变化会影响杀灭微生物的效果。

3.13

验证 **verification**

通过提供客观证据,对规定要求是否已得到满足的认定。

4 管理要求

4.1 医疗机构

4.1.1 应制定本机构口腔器械消毒灭菌工作管理制度。

4.1.2 应设立独立的器械处理区。

4.1.3 应根据口腔诊疗服务工作量配备专职或兼职口腔器械消毒灭菌工作人员。消毒灭菌的工作人员应参加岗前培训和继续教育,培训内容见附录 A。

4.2 器械处理区

4.2.1 应与口腔诊疗服务的范围和工作量相匹配,布局符合医院感染预防与控制的要求。

4.2.2 区域内分为回收清洗区、保养包装及灭菌区、物品存放区：

- a) 回收清洗区承担器械回收、分类、清洗、干燥工作。
- b) 保养包装及灭菌区承担器械保养、检查、包装、消毒和(或)灭菌工作。
- c) 物品存放区存放消毒、灭菌后物品,以及去除外包装的一次性卫生用品等。
- d) 工作量少的口腔门诊可不设物品存放区,消毒灭菌后将物品直接放于器械储存车内。

4.2.3 回收清洗区与保养包装及灭菌区间应有物理屏障。

4.2.4 工作流程设计应由污到洁,装饰材料应耐水、易清洁,并按照所配设备预留水、电、气等管线。

4.3 设备、设施

4.3.1 应根据口腔诊疗服务的实际情况合理配置设备、设施,并应符合国家相关标准或规定。

4.3.2 应配有污物回收器具、手工清洗池、工作台、超声清洗器及灭菌设备。

4.3.3 宜配备机械清洗消毒设备、牙科手机专用自动注油养护机、医用热封机、干燥设备等。

4.4 耗材

4.4.1 清洁剂:应符合国家相关标准或规定。根据器械的材质、污染物种类,选择适用口腔器械的清洁剂。

4.4.2 消毒剂:应选择合法有效的消毒剂。

4.4.3 润滑剂:牙科手机宜选择专用清洁润滑油,使用宜遵循生产厂家或供应商提供的说明书。其他口腔器械可选水溶性润滑剂。

4.4.4 包装材料:一次性医用皱纹纸、纸塑袋、纸袋、纺织品、无纺布等应符合 GB/T 19633 的要求;牙科器械盒应具有微生物屏障作用,适合各类型车针、根管器具等器械的放置。

4.4.5 消毒灭菌监测材料:应合法有效,并在有效期内使用。

5 口腔器械处理基本原则

5.1 口腔器械应一人一用一消毒和(或)灭菌。

5.2 高度危险口腔器械应达到灭菌水平。

5.3 中度危险口腔器械应达到灭菌水平或高水平消毒。

5.4 低度危险口腔器械应达到中或低水平消毒。

5.5 口腔器械危险程度分类与消毒灭菌要求见附录 B。

6 口腔器械处理操作流程

6.1 回收

6.1.1 口腔器械使用后应与废弃物品分开放置,及时回收。

6.1.2 口腔器械应根据器械材质、功能、处理方法的不同进行分类放置。具体如下：

- a) 结构复杂不易清洗的口腔器械(如牙科小器械、刮匙等)宜保湿放置,保湿液可选择生活饮用水或酶类清洁剂。
- b) 牙科手机、电动牙洁治器和电刀应初步去污,存放于干燥回收容器内。
- c) 其他器械可选择专用回收容器放置。

6.1.3 回收容器应于每次使用后清洗、消毒、干燥备用。

6.2 清洗

6.2.1 口腔器械清洗方法包括手工清洗和机械清洗(含超声波清洗)。手工、超声清洗操作方法应符合附录 C 要求;机械清洗方法应遵循生产厂家的使用说明或指导手册。

6.2.2 非电源口腔器械可选择机械清洗方法。

6.2.3 带电源口腔器械、精密复杂口腔器械宜选择手工清洗。

a) 可拆的器械应拆开后分别清洗,如电动牙洁治器。

b) 电动牙洁治器手柄宜选择手工清洗方法。

6.2.4 牙科小器械及其他结构复杂的器械宜首选超声清洗,清洗方法见附录 C 的 C.2。

6.2.5 牙科手机清洗应符合附录 D 要求。

6.3 干燥

6.3.1 宜选用干燥设备对器械、器具进行干燥处理。根据器械、器具的材质选择适宜的干燥温度:金属类干燥温度 70℃~90℃;塑料类干燥温度 65℃~75℃。

6.3.2 无干燥设备和不耐热的器械、器具,可使用低纤维絮擦布进行干燥处理。

6.4 检查与保养

6.4.1 应采用目测或使用带光源放大镜对干燥后的口腔器械进行检查。器械表面、螺旋结构处、关节处应无污渍、水渍等残留物质和锈斑。对清洗质量不合格的器械应重新处理;损坏或变形的器械应及时更换。

6.4.2 牙科手机的保养见附录 D。

6.5 消毒方法选择

6.5.1 物理消毒方法应首选湿热消毒,湿热消毒参数符合 WS 310.2 要求;清洗消毒器消毒方法见附录 C 的 C.3。

6.5.2 化学消毒方法应符合 WS/T 367 的要求。

6.6 包装

6.6.1 应根据器械特点和使用频率选择包装材料。

6.6.2 低度、中度危险的口腔器械可不包装,消毒或灭菌后直接放入备用清洁容器内保存。

6.6.3 牙科小器械宜选用牙科器械盒盛装。

6.6.4 封包要求如下:

a) 包外应有灭菌化学指示物,并标有物品名称、包装者、灭菌器编号、灭菌批次、灭菌日期及失效期,如只有 1 个灭菌器时可不标注灭菌器编号。

b) 口腔门诊手术包的包内、包外均应有化学指示物。

c) 纸塑袋包装时应密封完整,密封宽度 ≥ 6 mm,包内器械距包装袋封口处 ≥ 2.5 cm。纸袋包装时应密封完整。

d) 医用热封机在每日使用前应检查参数的准确性。

6.7 灭菌方法选择

6.7.1 口腔器械应首选压力蒸汽灭菌,选择小型灭菌器灭菌应符合附录 E 要求。

6.7.2 碳钢材质的器械宜选干热灭菌。

6.7.3 其他灭菌方法应符合 WS 310.2 要求。

7 监测要求

7.1 消毒监测

- 7.1.1 湿热消毒：每次应监测温度、时间，并记录。
- 7.1.2 化学消毒：应根据消毒剂种类定期监测化学消毒剂的浓度、消毒时间，并记录。
- 7.1.3 消毒效果监测：消毒后直接使用的物品宜至少每季度监测一次，监测方法及结果判读符合 WS/T 367 的要求。

7.2 灭菌监测

- 7.2.1 小型灭菌器监测应符合附录 E。
- 7.2.2 其他灭菌器灭菌方法的监测应符合 WS 310.3 相关规定。
- 7.2.3 每个灭菌周期运行均应形成文件记录，文件记录应保存 3 年，记录格式内容见附录 F。

8 消毒与灭菌物品放行

8.1 消毒物品放行

- 8.1.1 机械热力消毒应检查额定参数(温度、时间)，所得参数符合要求时，消毒物品方可放行。
- 8.1.2 用化学消毒剂消毒物品时应检查其消毒时间、浓度，符合 WS/T 367 的要求时，物品方可放行。

8.2 灭菌物品放行

- 8.2.1 每一灭菌周期结束后应检查所有物理参数、化学指示物，所得数据、指示物的显示与规定灭菌参数一致时，灭菌物品方可放行。
- 8.2.2 灭菌周期的各种监测或参数不合格时不应放行，应查找灭菌失败原因，重新调整后再进行物理、化学监测，合格后灭菌器方可再次使用，必要时做生物监测，并应记录全过程。

9 器械储存

- 9.1 储存区应配备物品存放柜(架)或存放车，并应每周对其进行清洁消毒。并注意以下事项：
 - a) 灭菌物品和消毒物品应分开放置，并有明显标识；
 - b) 采用灭菌包装的无菌物品储存有效期见表 1；

表 1 包装材料无菌有效期

包装类型	纺织材料和牙科器械盒	一次性纸袋	一次性皱纹纸和医用无纺布	一次性纸塑袋
有效期/d	7	30	180	180

- c) 裸露灭菌及一般容器包装的高度危险口腔器械灭菌后应立即使用，最长不超过 4 h；
 - d) 中、低度危险口腔器械消毒或灭菌后置于清洁干燥的容器内保存，保存时间不宜超过 7 d。
- 9.2 储存室内环境应符合 GB 15982 要求。

附 录 A
(规范性附录)
培训内容与管理要求

- A.1 医疗机构应为消毒灭菌人员提供参加技术培训机会,培训应有文字记录或证明。
- A.2 专兼职消毒灭菌工作人员,每年应至少参加消毒灭菌专业技术培训 1 次。
- A.3 培训内容应包括《传染病防治法》、《医院感染管理办法》、WS/T 367、职业暴露的预防等相关知识和表 A.1 所列培训内容和本标准内容。

表 A.1 消毒灭菌人员培训内容

类别	培训内容
回收清洗	污染器械的安全回收;器械去污和清洁;清洗设备使用;清洗方法选择;个人防护用品的正确使用
消毒与监测	消毒方法的选择;消毒药液的配比;消毒设备的使用;消毒效果的监测
消毒、灭菌前准备	清洗后器械的检查;器械保养方法的选择;待灭菌物品包装的选择;灭菌前质量检查
灭菌与监测	灭菌器使用;灭菌物品装载;灭菌程序选择;物理监测方法;化学监测方法;生物监测方法;各类监测的周期;监测结果判定;灭菌后放行标准
储存	储存条件与有效期
文件管理	灭菌监测记录;灭菌器维修保养及处理记录;各种记录保存时间

附 录 B
(规范性附录)

口腔器械危险程度分类与消毒、灭菌、储存要求

口腔器械危险程度分类与消毒、灭菌、储存见表 B.1。牙科手机灭菌后应清洁保存。

表 B.1 口腔器械危险程度分类与消毒、灭菌、储存

危险程度	口腔器械分类	消毒、灭菌水平	储存要求
高度危险	拔牙器械:拔牙钳、牙挺、牙龈分离器、牙根分离器、牙齿分离器、凿等	灭菌	无菌保存
	牙周器械:牙洁治器、刮治器、牙周探针、超声工作尖等		
	根管器具:根管扩大器、各类根管锉、各类根管扩孔钻、根管充填器等		
	手术器械:包括种植牙、牙周手术、牙槽外科手术用器械、种植牙用和拔牙用牙科手机等		
	其他器械:牙科车针、排龈器、刮匙、挖匙、电刀头等		
中度危险	检查器械:口镜、镊子、器械盘等	灭菌或高水平消毒	清洁保存
	正畸用器械:正畸钳、带环推子、取带环钳子、金冠剪等		
	修复用器械:去冠器、拆冠钳、印模托盘、垂直距离测量尺等		
	各类充填器;银汞合金输送器		
	其他器械:牙科手机、卡局式注射器、研光器、吸唾器、用于舌、唇、颊的牵引器、三用枪头、成形器、开口器、金属反光板、拉钩、挂钩、口内 X 光片夹持器、橡皮障夹、橡皮障夹钳等		
低度危险	调刀:模型雕刻刀、钢调刀、蜡刀等	中、低度水平消毒	清洁保存
	其他器械:橡皮调拌碗、橡皮障架、打孔器、牙锤、聚酯枪、卡尺、抛光布轮、技工钳等		

附 录 C

(规范性附录)

器械、器具和物品的清洗操作方法

C.1 手工清洗

C.1.1 操作程序

C.1.1.1 冲洗:将器械、器具和物品置于流动水下冲洗,初步去除污染物。

C.1.1.2 冲洗后,应用酶清洁剂或其他清洁剂浸泡后刷洗、擦洗。

C.1.1.3 漂洗:刷洗、擦洗后,再用流动水清洗。

C.1.2 注意事项

C.1.2.1 手工清洗时水温宜为 15℃~30℃。

C.1.2.2 去除干固的污渍宜先用酶清洁剂浸泡,浸泡时间和酶清洁剂使用液浓度参考生产厂家使用说明书,浸泡后再行刷洗或擦洗。

C.1.2.3 刷洗操作应在水面下进行,防止产生气溶胶。

C.1.2.4 管腔器械应用压力水枪冲洗,可拆卸部分应拆开后清洗。

C.1.2.5 应选用相匹配的刷洗用具、用品,避免器械磨损。

C.1.2.6 清洗用具、清洗池等应每日清洁和消毒。

C.2 超声清洗

C.2.1 操作程序

C.2.1.1 冲洗:流动水下冲洗器械,初步去除污染物。

C.2.1.2 洗涤:清洗器内注入清洗用水,并添加清洁剂。水温应 $\leq 45^{\circ}\text{C}$ 。应将器械放入篮筐中,浸没于水面下,管腔内注满水。

C.2.1.3 终末漂洗:使用流动水进行漂洗。

C.2.1.4 超声清洗操作,应遵循生产厂家的使用说明或指导手册。

C.2.2 注意事项

C.2.2.1 清洗时应盖好超声清洗机盖子,防止产生气溶胶。

C.2.2.2 应根据器械的不同材质选择相匹配的超声频率和时间。

C.2.2.3 牙科小器械使用超声清洗时宜配备专用网篮。

C.3 自动清洗消毒

C.3.1 适用于耐湿热物品的清洗和消毒,如玻璃调拌板、金属调拌刀、橡皮碗等。

C.3.2 根据器械的形状和特性选择适宜的清洗盛装架,精细和锐利器械应固定放置。

C.3.3 清洗消毒器用水应符合清洗设备说明书要求,预洗阶段水温不应高于 45℃。

C.3.4 消毒温度与时间应符合 WS 310.2 要求。

C.3.5 应定期检查设备的清洗消毒效果。

C.3.6 注意事项如下：

- a) 可拆卸器械清洗时应拆开清洗，器械轴节应充分打开；
- b) 选择不同清洗消毒程序时应注意确认消毒参数；
- c) 应定时检查清洁剂泵、管是否通畅。

附 录 D
(规范性附录)
牙科手机清洗、保养方法

D.1 牙科手机清洗保养原则

D.1.1 牙科手机应根据内部结构或功能选择适宜的清洗保养方法。

D.1.2 特殊用途牙科手机,应遵循生产厂家或供应商提供的使用说明进行清洗与保养。

D.2 牙科手机清洗方法

D.2.1 手工清洗方法

D.2.1.1 牙科手机使用后可在带车针情况下使用牙科综合治疗台水、气系统冲洗牙科手机内部水路、气路 30 s,如图 D.1。

D.2.1.2 将牙科手机从快接口或连线上卸下,取下车针,去除表面污染物,如图 D.2。

a) 带光纤牙科手机可用气枪吹净光纤表面的颗粒和灰尘,擦净光纤表面污渍;

b) 带螺纹的牙科手机表面可用软毛刷在流动水下清洗,如图 D.3。

D.2.1.3 使用压力罐装清洁润滑油清洁牙科手机进气孔管路,或使用压力水枪冲洗进气孔内部管路,然后使用压力气枪进行干燥。

D.2.1.4 注意事项如下:

a) 使用压力罐装清洁润滑油过程中使用透明塑料袋或纸巾包住机头部,避免油雾播散,如图 D.4;

b) 部件可拆的种植牙专用手机应拆开清洗;不可拆的种植牙专用手机可选用压力水枪进行内部管路清洗;

c) 使用压力水枪清洗牙科手机后应尽快使用压力气枪进行内部气路的干燥,避免轴承损坏;

d) 压力水枪和压力气枪的压力宜在 200 kPa~250 kPa,不宜超过牙科手机使用说明书标注压力;

e) 牙科手机不应浸泡在液体溶液内清洗;

f) 使用罐装清洁润滑油清洁内部的过程中,如有污物从机头部位流出,应重复 D.2.1.3 操作直到无油污流出为止。

D.2.2 机械清洗方法

D.2.2.1 表面清洁应符合 D.2.1.2。

D.2.2.2 牙科手机放入机械清洗设备内,固定牙科手机,选择正确的清洗程序。

D.2.2.3 机械清洗设备内应配有牙科手机专用接口,其清洗水流、气流符合牙科手机的内部结构。

D.2.2.4 机械清洗设备用水宜选用去离子水、软水或蒸馏水。

D.2.2.5 注意事项如下:

a) 电源马达不应使用机械清洗机清洗;

b) 牙科手机清洗后内部管路应进行充分干燥;

c) 牙科手机不宜选用超声波清洗;

d) 牙科手机不宜与其他口腔器械同时清洗。

D.3 牙科手机保养

D.3.1 手工保养方法

D.3.1.1 用压力罐装润滑油连接相匹配的注油适配器或接头对牙科手机注入润滑油,如图 D.5。

D.3.1.2 牙科手机夹持器械的部位(卡盘或三瓣簧)应每日注油,如图 D.6。

D.3.1.3 内油路式牙科手机宜采用油脂笔对卡盘或三瓣簧和轴承进行润滑,图 D.7。

D.3.1.4 低速牙科弯机和牙科直机注油可参考以上注油方式(若适用),特殊注油方式应参考厂家或供应商使用说明书执行。

D.3.1.5 注意事项如下:

- a) 清洁注油时应将注油接头与牙科手机注油部位固定,以保证注油效果;
- b) 避免油雾播散应符合 D.2.1.4 a) 要求;
- c) 选择压力罐装清洁润滑油对牙科手机进行清洁的可以不用再次注入润滑油。

D.3.2 机械保养方法

D.3.2.1 将牙科手机连接相匹配的注油适配器或接头后插入自动注油养护机内进行注油。

D.3.2.2 选择适宜的注油程序。

D.4 其他方法

牙科手机可选择清洗注油灭菌一体机进行清洗、润滑保养。

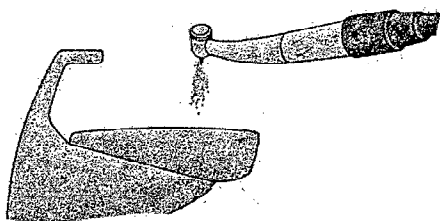


图 D.1 牙科手机内部冲洗

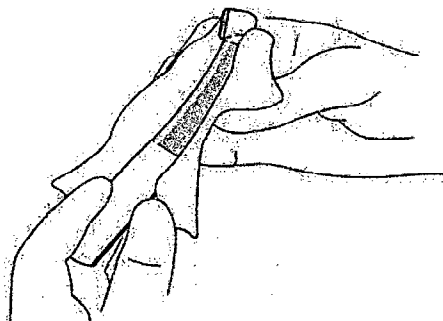


图 D.2 牙科手机表面清洁

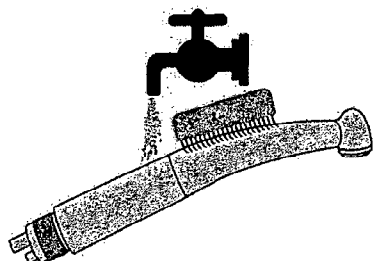


图 D.3 带螺纹牙科手机表面清洁

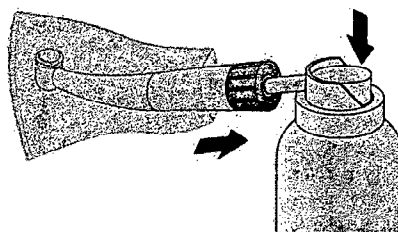


图 D.4 避免油雾播散

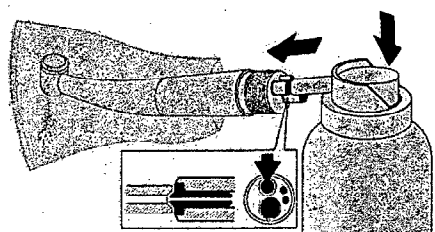


图 D.5 牙科手机手工注油

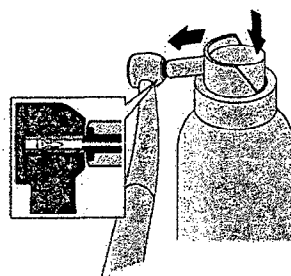


图 D.6 牙科手机卡盘或三瓣簧注油

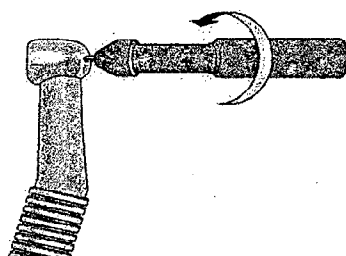


图 D.7 内油路式牙科手机油脂笔注油

附 录 E
(规范性附录)
小型灭菌器灭菌与监测要求

E.1 灭菌要求

E.1.1 灭菌周期

E.1.1.1 根据待灭菌物品的危险程度、负载范围选择灭菌周期。小型灭菌器周期见表 E.1。
E.1.1.2 不同分类的灭菌周期和相关的设置只能应用于指定类型物品的灭菌。对于特定负载的灭菌过程需要通过验证。

表 E.1 小型灭菌器灭菌周期

灭菌器周期	灭菌负载范围
B 类灭菌周期	用于所有包装的和无包装的实心负载、A 类空腔负载和多孔渗透负载的灭菌
N 类灭菌周期 ^a	用于无包装的实心负载的灭菌
S 类灭菌周期 ^b	用于制造商规定的特殊灭菌物品,包括无包装实心负载和至少以下一种情况:多孔渗透性物品、小量多孔渗透性条状物、A 类空腔负载、B 类空腔负载、单层包装物品和多层包装物品
^a N 类灭菌周期不能用于牙科手机等管腔类器械的灭菌。 ^b S 类灭菌周期应有生产厂家或供应商提供可灭菌口腔器械的类型、灭菌验证方法。	

E.1.2 灭菌参数

灭菌参数见表 E.2。
其使用中温度上限、相对压力波动范围可参考小型灭菌器使用说明书。

表 E.2 灭菌参数

温度/℃	最短灭菌时间/min	相对压力/kPa
121	15	103.6
132	4	185.4
134	3	202.8
注:相对压力一般指表压,是测量系统相对于大气压的压力值。		

E.1.3 灭菌前准备

E.1.3.1 每日设备运行前应进行安全检查,包括:压力表处于“零”的位置;记录打印装置处于备用状态;灭菌柜门密封圈平整无松懈;柜门安全锁扣能够灵活开、关;柜内冷凝水排出口通畅;电源、水源等连接妥当。
E.1.3.2 打开电源,开机预热,选择相应灭菌周期。
E.1.3.3 灭菌器用水应符合 YY 0646 要求。

E.1.4 灭菌装载

E.1.4.1 灭菌物品不能超过该灭菌器最大装载量。

E.1.4.2 灭菌器应配有灭菌架或托盘,托盘应有足够的孔隙使蒸汽穿透。

E.1.4.3 使用灭菌架摆放包装类灭菌物品,物品间应留有一定的间隙。

E.1.4.4 使用托盘摆放纸塑包装器械和无包装器械应单层摆放,不可重叠。

E.1.4.5 配套使用器械应分开灭菌,如牙科手机与车针、电动牙洁治器手柄与工作尖等。

E.1.4.6 待灭菌物品应干燥后装入灭菌器内。

E.1.5 灭菌器维护

E.1.5.1 应根据生产厂家或供应商提供的使用说明对灭菌器进行维护。

E.1.5.2 灭菌器操作人员应对灭菌器进行日常维护,包括检查灭菌门密封圈、排放滤网、灭菌舱内外表面的清洁、更换记录器打印纸等。

E.1.5.3 灭菌器调试或更换消耗性的部件,如记录装置、过滤器、蒸汽阀、排水管、密封圈等应由经过专业培训的人员进行维护。

E.1.5.4 灭菌器使用满 12 个月或使用中出现故障时应由专业人员进行全面维护。

E.1.5.5 灭菌器的日常维护、年度维护、维修或调试均应形成文字记录。

E.2 灭菌器监测要求

E.2.1 物理参数监测

E.2.1.1 每一灭菌周期应监测物理参数,并记录工艺变量。

E.2.1.2 工艺变量及变化曲线应由灭菌器自动监控,并打印。

E.2.1.3 工艺变量结果应符合附录 E 中表 E.2 灭菌参数要求。

E.2.2 化学监测

E.2.2.1 每个灭菌周期应进行化学监测,并记录监测结果。

E.2.2.2 化学监测应将包内化学指示物放置在常用的、有代表性的灭菌包或盒内,置于灭菌器最难灭菌的部位。裸露灭菌的实心器械可将包内化学指示物放于器械旁进行监测。空腔器械可选择化学 PCD 进行监测。

E.2.2.3 应通过观察化学指示物颜色变化,判定是否暴露于灭菌工艺变量或达到灭菌要求。

E.2.3 生物监测

E.2.3.1 生物监测包应选择灭菌器常用的、有代表性的灭菌包制作,或使用生物 PCD,置于灭菌器最难灭菌的部位,且灭菌器应处于满载状态。

E.2.3.2 使用中的灭菌器应每月进行生物监测。

E.2.3.3 生物监测方法和结果判断应符合 WS 310.3 标准要求。

E.2.4 注意事项

E.2.4.1 小型灭菌器每使用满 12 个月或维修后应同时进行物理监测、化学监测和生物监测,合格后灭菌器方可正常使用。

E.2.4.2 小型灭菌器新安装或更换主要部件时应进行灭菌性能确认,验证方法应符合国家相关要求。

附 录 F
(资料性附录)
灭菌器灭菌周期运行记录表

灭菌器灭菌周期运行记录见表 F.1。

表 F.1 灭菌周期运行记录表

灭菌日期： 年 月 日	灭菌器标识(编号)：	灭菌周期：B类 <input type="checkbox"/> S类 <input type="checkbox"/> N类 <input type="checkbox"/>	灭菌锅次：第 锅
化学监测：合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未测 <input type="checkbox"/>	生物监测：合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 未测 <input type="checkbox"/>	其他监测 ^a ： 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	
工艺变量监测(物理参数)：合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 自动打印工艺变量粘贴处(灭菌压力、温度、时间)			
灭菌装载物说明 ^b 或编号 ^c ：			
确定监测数据：灭菌物品放行 <input type="checkbox"/>		放行人员签名：	
<div>^a 注明监测方法。 ^b 注明灭菌的包装类型、主要器械名称。如纸塑包装类器械、多孔布包、器械盒等。 ^c 如牙科手机为 01,牙科小器械为 02 等。</div>			

中华人民共和国卫生
行 业 标 准
口腔器械消毒灭菌技术操作规范
WS 506—2016

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 1.25 字数 34 千字
2017年1月第一版 2017年1月第一次印刷

*

书号: 155066·2-30385

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

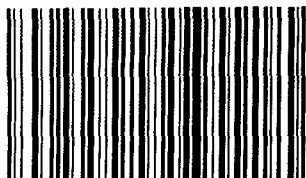

WS 506-2016